



Crochet Adams (élément de rétention multibras)




Plier le fil à 90°.

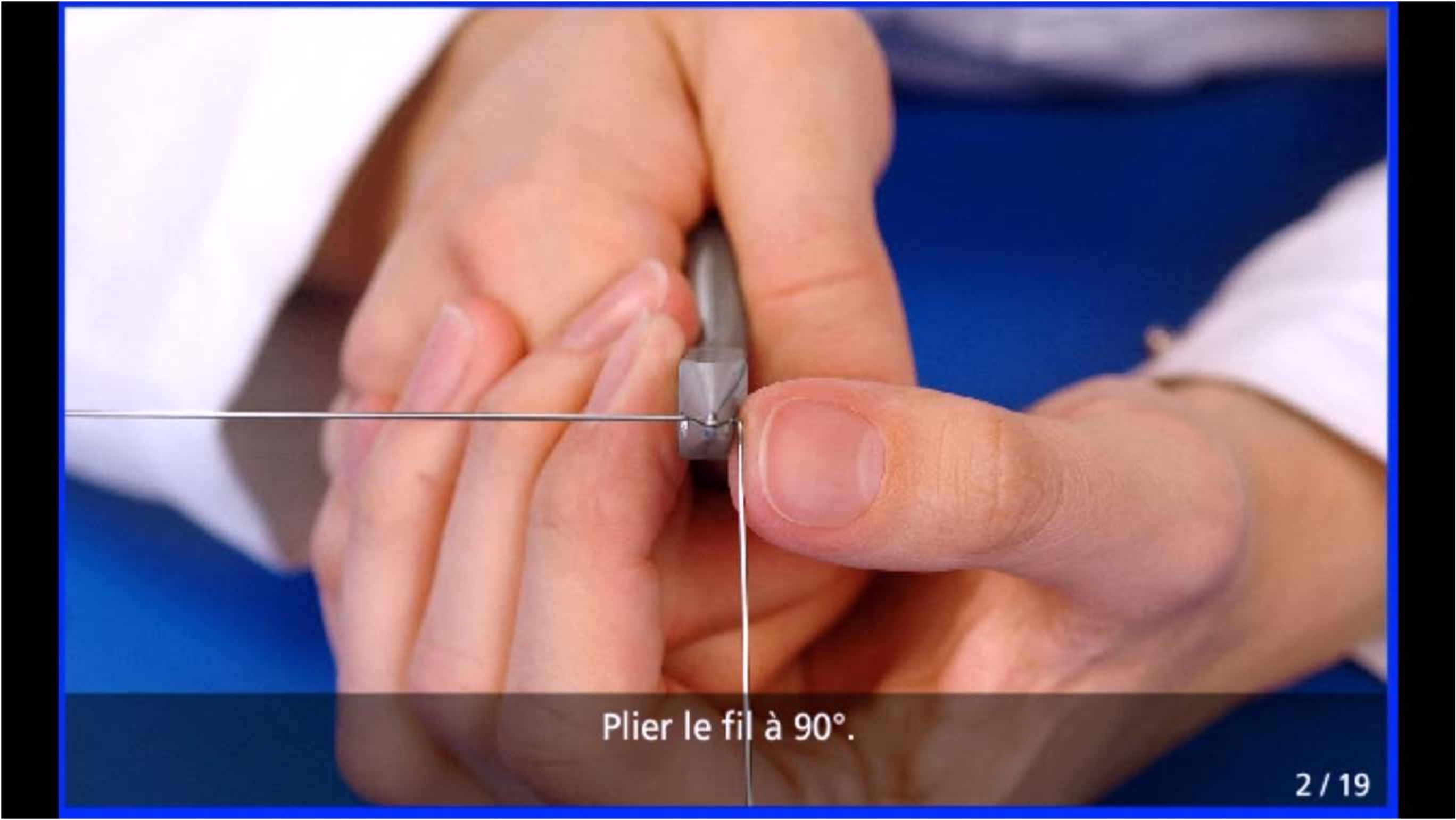

Repère correspondant à la taille du crochet

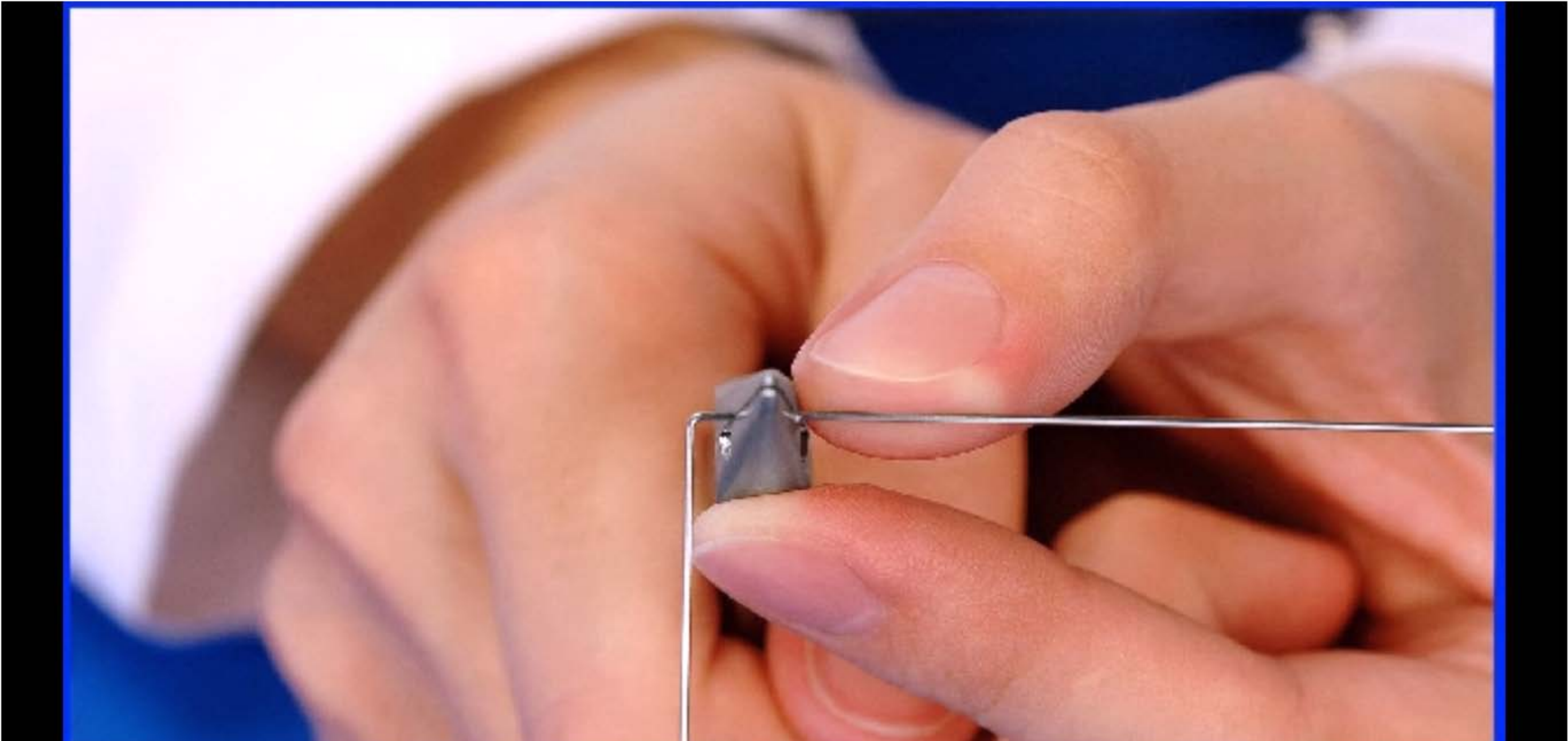

Plier le fil à 90° au niveau du repère.

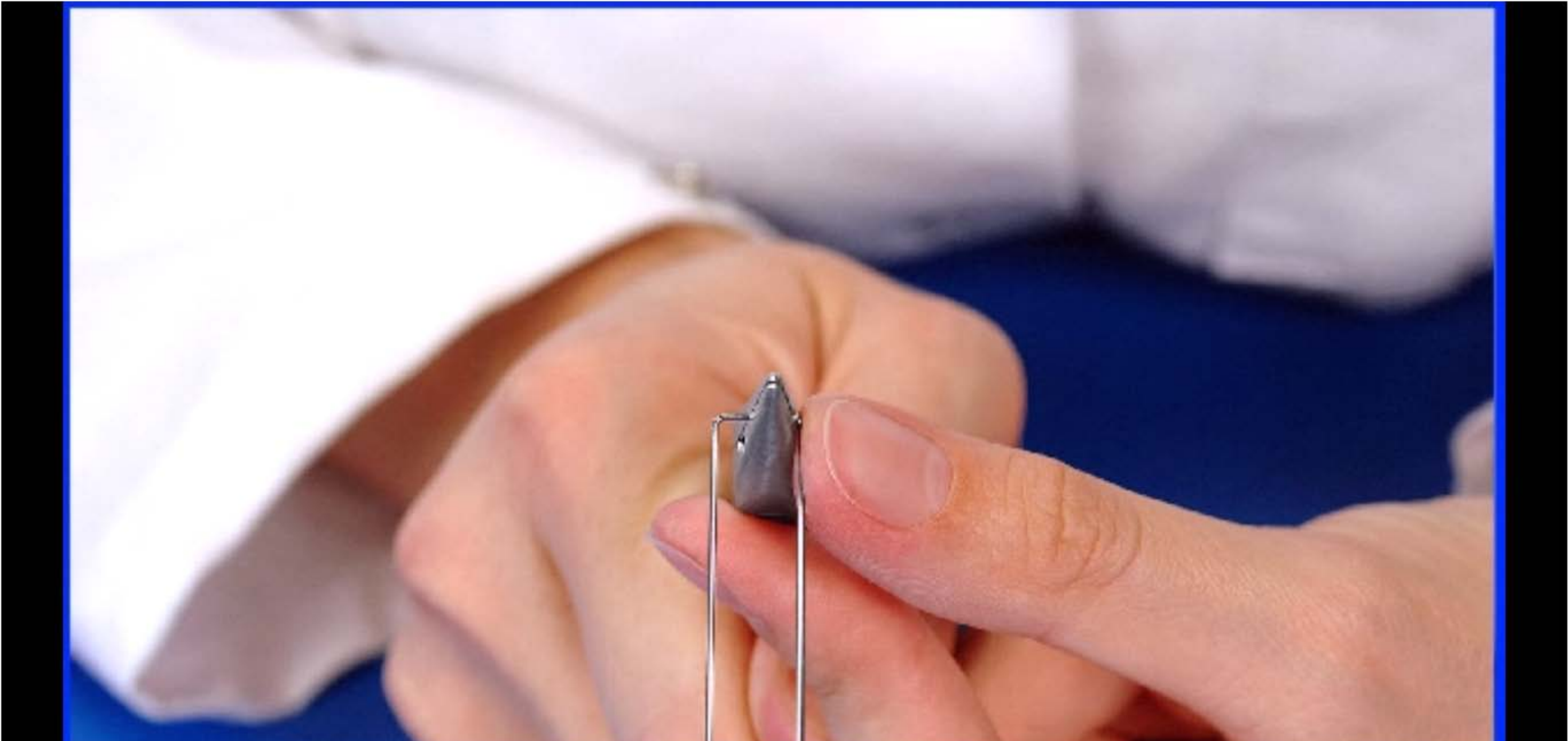

Plier le fil à 90° au niveau du repère.



Réaliser une petite boucle à chaque extrémité, sous la partie à angle droit.






Réaliser une petite boucle à chaque extrémité, sous la partie à angle droit.







Positionner l'élément de connexion à environ 1/3 en dessous des pointes cuspidiennes et à 1 mm (environ) de la face vestibulaire.

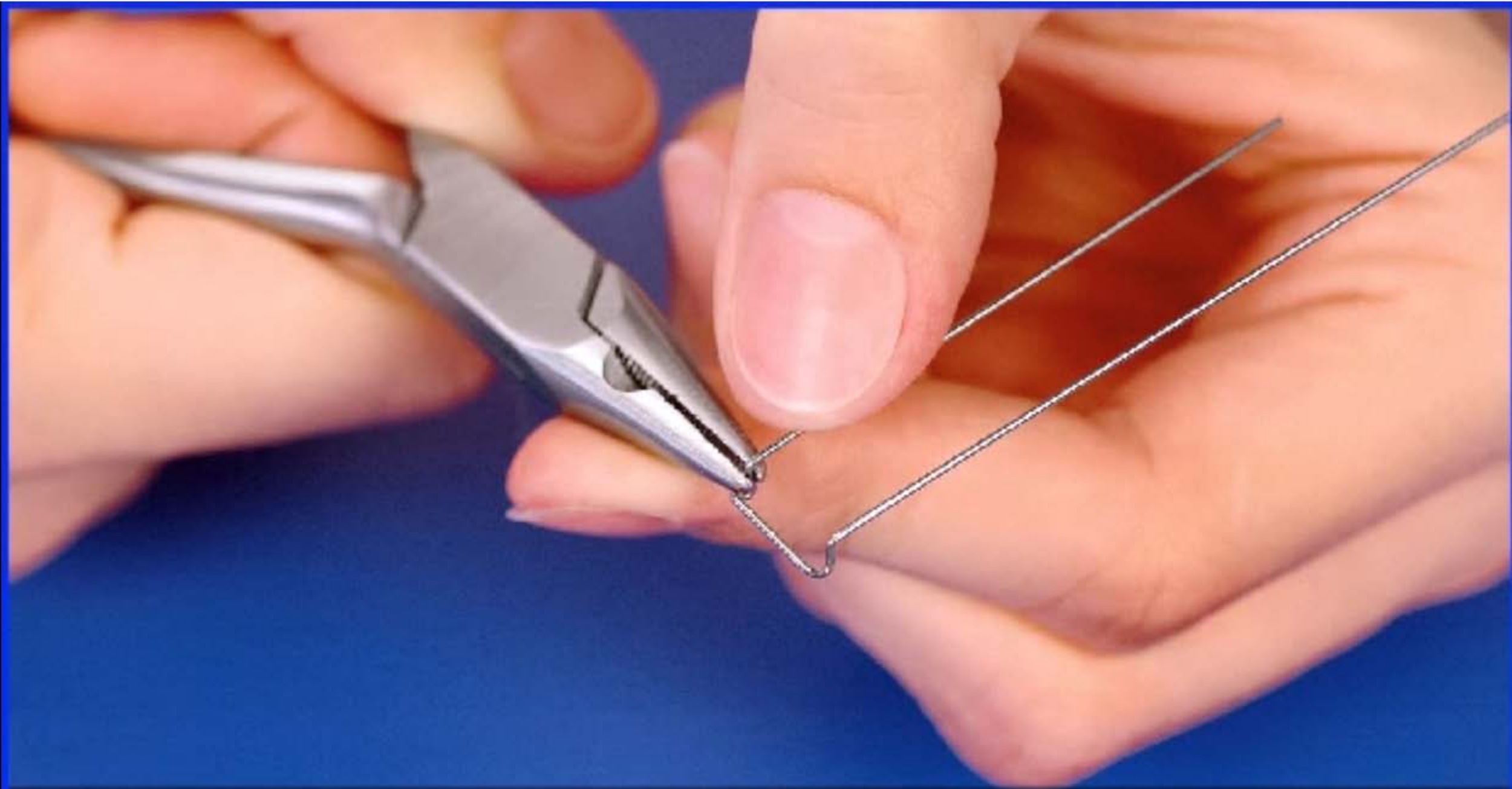

Positionner l'élément de connexion à environ 1/3 en dessous des pointes cuspidiennes et à 1 mm (environ) de la face vestibulaire.



Les boucles doivent épouser la forme des faces proximales sans les comprimer.



Orienter les deux bras vers l'intérieur de la cavité buccale.



Adapter les extrémités du crochet au profil de l'arcade.





Réaliser une boucle de rétention à chaque extrémité.







Réaliser une boucle de rétention à chaque extrémité.

